

AXTAIR AUTOMORPHO® AXENSOR®



OPIS PRODUKTU

- Materac Axtair Automorpho Axensor został stworzony w celu zapobiegania i leczenia już istniejących odleżyn:

- dla pacjentów o wysokim ryzyku odleżyn, wstających lub nie w ciągu dnia, leżących ponad 15 godzin na dobę.
- dla pacjentów całkowicie leżących, o słabej kondycji ogólnej.

- Axtair Automorpho Axensor, wyposażony jest w opatentowany układ pompowania określający stopień napompowania w zależności od budowy anatomicznej pacjenta.

- Axtair Automorpho Axensor komunikuje się oraz jest całkowicie automatyczny. Efektem takiego działania jest:

- lepsza opieka terapeutyczna nad pacjentem
- gwarancja bezpieczeństwa pacjenta, opiekunów i innych osób asystujących
- optymalizacja zarządzania zasobami.

- Waga pacjenta od 30 do 200 kg.

ZAWÓR CPR (resuscytacja krążeniowo-oddechowa)

- Otwieranie lub zamykanie zaworu jedną ręką.
- Opróżnianie materaca w ciągu 15 sekund.
- Napętnianie materaca w czasie krótszym niż 2 minuty przy zastosowaniu szybkiej pompy.

CZUJNIK ŻYROSKOPOWY AXENSOR

- Automatyczne dostosowanie ciśnienia do budowy i pozycji pacjenta.

POKROWIEC CIC

- Góra: elastyczny, nieprzepuszczalny dla cieczy, paroprzepuszczalny.
- Dół: antypoślizgowa baza

2 dostępne pokrowce:

- Promust PU HD
- Promust CIC (zabezpieczenie antybakteryjne dzięki jonom srebra)

POZYCJA LEŻĄCA NA BRZUCHU (VENTRAL DECUBITUS)

- Funkcja w opcji.
- Wypuszczenie powietrza w wybranych komorach.

KOMORY

- 18 wymiennych komór z PU, wysokość terapeutyczna komory – 12 cm.
- Łatwe uwalnianie powietrza za pomocą dwóch zamków błyskawicznych (1 od strony nóg i 1 od strony głowy materaca) na czas czyszczenia i dezynfekcji.

CPC/ŁĄCZE DANYCH

- Automatyczne zamykanie obiegów powietrza po odłączeniu.
- Komunikacja materac - pompa

ODCIAŻENIE PIĘT


- Możliwe jest wypuszczenie powietrza z 4 komór od strony stóp



Pompa:

- Opatentowany system automatycznego i stałego obliczania ciśnienia, pompowania zgodnie z budową ciała i pozycją pacjenta w łóżku
- Możliwość monitorowania pracy materaca oraz ruchów pacjenta poprzez program komputerowy
- 3 tryby działania: dynamiczny, statyczny nisko-ciśnieniowy, terapeutyczny
- Przycisk "I" - informacja techniczna urządzenia
- Alarmy wizualne i dźwiękowe
- Numer serii z tyłu kompresora, uproszczona instrukcja obsługi i kod QR po bokach

- DETEKCJA
- ANALIZA
- KOMUNIKACJA
- POMOC W DECYZJACH (RAPORTOWANIE)
- IDENTYFIKOWALNOŚĆ

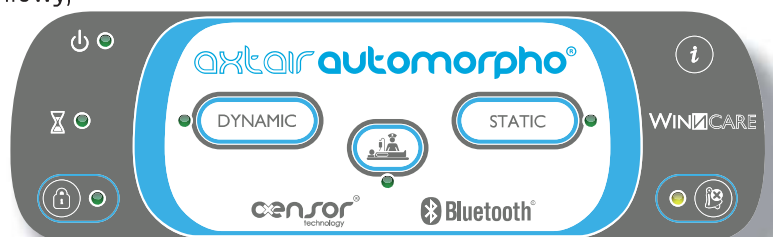

Producent: WinnCare Group - 200 rue Charles Tellier - Actiparc de Grézan - 30034 Nîmes Cedex 1 France
Ph : +33 (0)4 66 02 15 15 - Fax : +33 (0)4 66 02 15 00 - Email : contact.askle@winnCare.fr - www.winnCare.fr




Dążąc do stałego udoskonalania swoich produktów, firma ASKLÉ SANTÉ zastrzega sobie prawo do modyfikowania charakterystyki technicznej bez wcześniejszego powiadomienia.

Rzeczywiste produkty mogą się różnić od tych na zdjęciach / Fotografie nie stanowią wartości handlowej.



Rodzaje materaców AXTAIR AUTOMORPHO® AXENSOR®

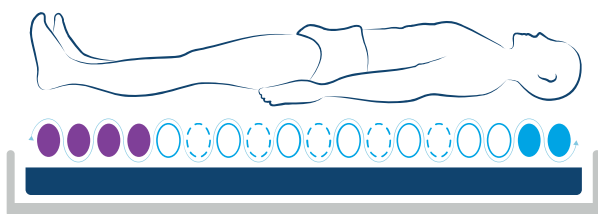

axensor® AT12 AT15



GŁÓWNE CECHY:

Materac zmiennociśnieniowy dostępny w dwóch wysokościach:

- Materac o wysokości 12 cm - model AT12
 - 12 cm komory terapeutyczne
 - Waga maksymalna pacjenta do 165 kg
- Materac o wysokości 15 cm - model AT15 i AT15DV
 - 15.5 cm komory powietrza
 - Waga maksymalna pacjenta do 180 kg

3 strefy terapeutyczne:

- 2 statyczne komory umiejscowione w okolicach głowy
- 12 zmiennych komór umiejscowionych w części sacrum
- 4 niezależne komory w okolicach stóp

Pozycja na brzuchu

Wybrane komory powietrza z mniejszą ilością powietrza zapobiegają powstawianiu dodatkowych urazów skóry oraz wydzieliny oskrzelowej u pacjentów podłączonych do sztucznego oddychania.



axensor® AT20



GŁÓWNE CECHY:

Materac zmiennociśnieniowy

- 20 cm komory powietrza
- Waga maksymalna 200 kg

4 strefy terapeutyczne

- 2 statyczne komory umiejscowione w okolicach głowy
- 4 komory w odcinku od szyi do klatki piersiowej
- 10 komór umiejscowionych w części sacrum z podstawą powietrzną stałą zapewniającą stabilność i zapobiegającą opadnięciu pacjenta
- 5 niezależnych komór w okolicach stóp

Zawór CPR

(resuscytacja krążeniowo-oddechowa)

Pozwala na wypuszczenie powietrza z materaca (15 s) w celu resuscytacji pacjenta.

Boczny wentyl CPR

Pozwala na natychmiastowe wypuszczenie powietrza z materaca (5 s)



Łatwa instalacja i czyszczenie dzięki łatwo odczepianym komorom.

axensor® PODUSZKA



Dla pacjentów w celu zapobiegania i leczenia odleżyn. Poduszka posiada pokrowiec CIC z jonami srebra.

	NR REFERENCYJNY	POMPA	WYSOKOŚĆ KOMORY POWIETRZA	BAZA PIANKOWA	WYMIARY	WAGA PACJENTA	CPR	NORMY DOTYCZĄCE ZAPALNOŚCI
AXENSOR® AT12	VAXT6 /AUTO	22 x 25 x 11.5 cm 3 tryby: dynamiczny, statyczny nisko-ciśnieniowy, terapeutyczny (dla poduszki możliwy tylko tryb dynamiczny.) Technologia oparta na zmiennym ciśnieniu w co drugiej komory w cyklu od 14 do 20 min. Opatentowany system automatycznego i stałego obliczania ciśnienia, pompowania zgodnie z morfologią i pozycją pacjenta w łóżku Alarmy wizualne i dźwiękowe Przepływ > 8 l/min. 220-240 V - 50Hz klasy II type BF; Zużycie elektryczne: 5 Watts Decybele pompy <35 dBA w odniesieniu do NF ISO 3744:1995	12 cm	5 cm polyetherowa piankowa baza umiejscowiona niezależnie od komór powietrza	195 X 87 X 17 cm	30 do 165 Kg	✓	EN 597 część 1 i 2 GPEM D1-90 i D1-89 bis
AXENSOR® AT15	VAXT6 /MAX		15,5 cm		195 X 87 X 20,5 cm	30 do 180 Kg	✓	
AXENSOR® AT15 DV	VAXT6 /MAX-DV		15,5 cm		195 X 87 X 20,5 cm	30 do 180 Kg	✓	
AXENSOR® AT20	VAXT6/ AT20		20 cm	Brak podstawy z pianki w modelu AT20 oraz poduszce	195 X 87 X 20,5 cm	30 do 200 Kg	✓	
PODUSZKA AXENSOR®	VAXT6 /CO /AUTO	Zgodność z wymogami elektrycznymi i elektromagnetycznymi, wg norm	10 cm		45 X 45 X 10 cm	30 do 150 Kg		

Konserwacja: Promust PU HD i CIC



2 lata gwarancji



Producent: WinnCare Group - 200 rue Charles Tellier - Actiparc de Grézan - 30034 Nîmes Cedex 1 France
Ph : +33 (0)4 66 02 15 15 - Fax : +33 (0)4 66 02 15 00 - Email : contact.askle@winncare.fr - www.winncare.fr

WINN CARE
g r o u p e



Dążąc do stałego udoskonalania swoich produktów, firma ASKLÉ SANTÉ zastrzega sobie prawo do modyfikowania charakterystyki technicznej bez wcześniejszego powiadomienia.

Rzeczywiste produkty mogą się różnić od tych na zdjęciach / Fotografije nie stanowią wartości handlowej.

